


Jak wybrać odpowiedni model dygestorium?

1. Jak duże dygestorium jest Ci potrzebne?

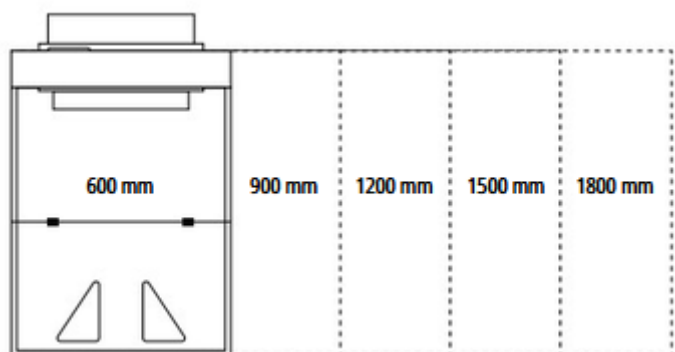

- ☐ 600 mm
- ☐ 900 mm
- ☐ 1200 mm
- ☐ 1500 mm
- ☐ 1800 mm

2. Jakie otwory robocze?



- ☐ Dwa otwory trójkątne




- ☐ Jeden otwór trapezoidalny

3. Z jakimi substancjami będzie używane dygestorium?




- ☐ Tylko substancje ciekłe – w tym przypadku potrzebne będą filtry węglowe aktywne

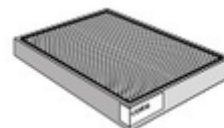

- ☐ Tylko substancje sypkie – potrzebne będą filtry HEPA + SH200 + CAR200 (tylko dygestoria klasy drugiej)



- ☐ Substancje i ciekłe, i sypkie – potrzebne będą filtry aktywne węglowe + HEPA + SH200

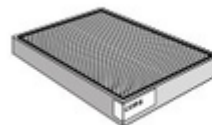

+




Jak wybrać odpowiedni model dygestorium?

4. Czy potrzebny Ci aktywny filtr bezpieczeństwa do każdego modułu filtracyjnego i automatyczny detektor saturacji?

☐ TAK – Dygestorium klasy pierwszej

1. Aktywny filtr bezpieczeństwa
2. Chemiczny detektor saturacji dla aktywnego filtra węglowego
3. Panel dotykowy z alarmem

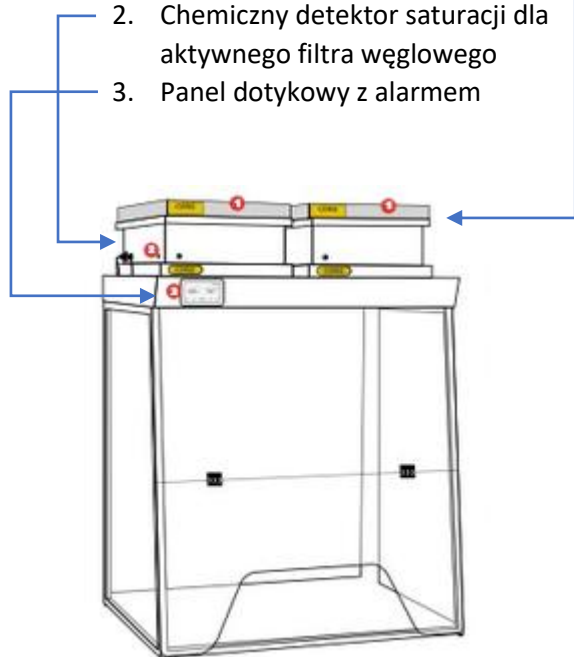

Model +2C
Tylko ciecze




aktywny filtr węglowy
bezpieczeństwa

aktywny filtr węglowy



Model +H2C
Ciecze i pyły

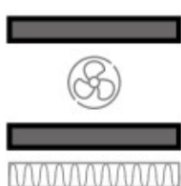


aktywny filtr węglowy
bezpieczeństwa

aktywny filtr węglowy
filtr HEPA



Model +2CH
Tylko ciecze w
sterylnych warunkach

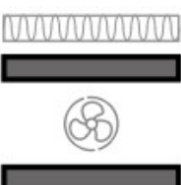


filtr HEPA

aktywny filtr węglowy
bezpieczeństwa

aktywny filtr węglowy

☐ NIE – Dygestorium klasy drugiej

1. Manualna kontrola saturacji aktywnych filtrów węglowych
2. Panel dotykowy z alarmem

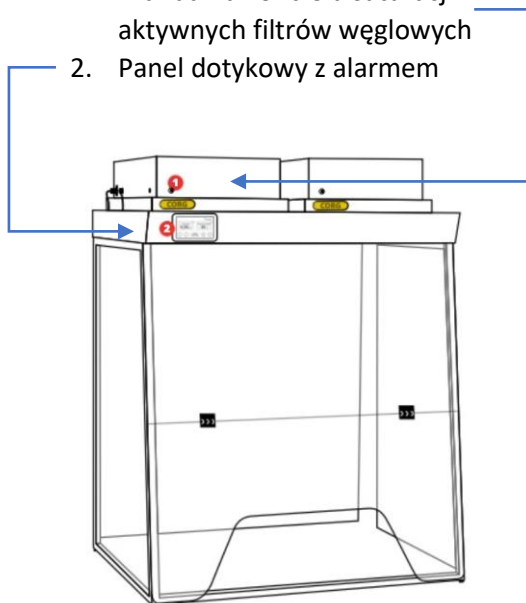

Tylko ciecze



aktywny filtr węglowy



Tylko pyły



przylącze
filtr HEPA



Ciecze i pyły





aktywny filtr węglowy
filtr HEPA

Jak wybrać odpowiedni model dygestorium?

5. Na czym będzie stało dygestorium?



- ☐ Twój blat
- ☐ Z blatem roboczym i tacą wychwytową (opcjonalnie)
- ☐ Z oświetleniem (opcjonalnie)

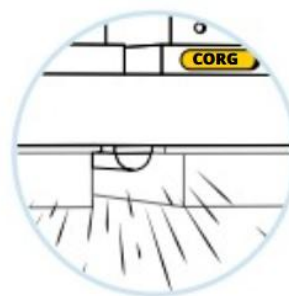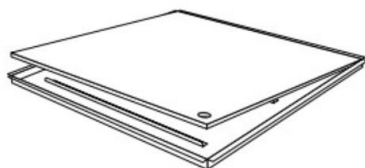

- ☐ Dedykowany stół (3 warianty) – obowiązkowo z blatem roboczym i tacą wychwytową
- ☐ Z oświetleniem (opcjonalnie)